

Manual för registrering och uppföljning av 1177 i SWIBREG

Genom att registrera patienten i 1177 kan patienten enkelt besvara sina frågeformular via 1177 och svaren går direkt till SWIBREG. Observera att patienten måste informeras om att frågeformulär skickas via 1177. Patienten måste även ha ett konto på 1177 och där ha meddelat hur de vill bli aviserade, se patientinstruktion.

1. Välj patient, gå in på patientdata och välj program.

The screenshot shows the SWIBREG patient data interface. The 'Patientdata' menu is open, and the 'Program' option is circled in red. The main area displays a graph for 'F-Calprotectin (mg/kg)' and a table of clinical data.

Ansvarig läkare:	Ansvarig sjuksköterska:	Kön:	Ålder vid dagens datum:
		Man	33

2. Klicka på starta nytt program

På denna sida har du möjlighet att starta programmen 1177 samt IBD Home för en patient. I listan Program visas de program som patienten är inkluderad i. I listan Planerade kontakter visas de enkäter som patienten har gjort/skall göra.

Program	Status	Datum för programstart
Starta nytt program		

3. Välj 1177 i menyn för starta program, ange datum för start och klicka därefter på Starta program

Program	Status	Datum för programstart
Starta nytt program		

Starta/stoppa program

Program: 1177

Datum för programstart: 2018-08-14

Starta program

4. Under Program visas nu 1177 som aktiverat. Under planerade kontakter klicka på datumet vid raden Start för att bekräfta ditt val och gå vidare.

På denna sida har du möjlighet att starta programmen 1177 samt IBD Home för en patient. I listan Program visas de program som patienten är inkluderad i. I listan Planerade kontakter visas de enkäter som patienten har gjort/skall göra.

Program	Status	Datum för programstart
1177	Aktiverat	2018-08-27

2018-09-01 Boka kontakt

Planerade kontakter - 1177				
Datum	Program	Typ av kontakt	Status	Radera
2018-08-27	1177	1177	Planerad	
2018-08-27	1177	Start	Planerad	
2019-08-27	1177	1177	Planerad	
2020-08-27	1177	1177	Planerad	

Efter att ett program är aktiverat så kan det ta upp till en minut innan statusen blir uppdaterad.

1177 Avisering:	1177 Avisering skickad:
-----------------	-------------------------

Spara

5. Klicka på planerat datum för att välja förvalt datum eller skriv in ett eget datum i rutan. Klicka på fortsätt


Datum:

2018-08-13

Fortsätt Avbryt

Powered by RealQ*

6. När meddelanderutan kommer upp tryck ok

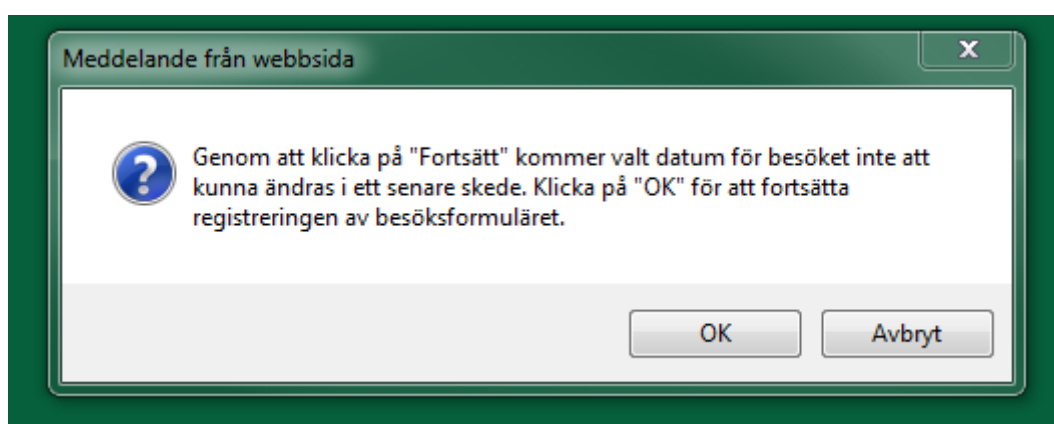

7. Här fyller du i att patienten samtyckt till att besvara frågeformuläret via 1177. Tryck sedan förhandsgranska.

Datum:
2018-08-13

Informerat samtycke, 1177:
Ja

"Spara temporärt" sparar en arbetskopia av formuläret i de fall formuläret ska färdigställas vid ett senare tillfälle.
"Förhandsgranska" för från den vyn välja "Spara & stäng", dvs. slutföra registreringen.
Vid valet "Avbryt" sparas inga ifyllda fält i formuläret, enbart datum för besöket. Formuläret återfinns som Arbetskopia i tabellen Studiekontakter på sidan Studiedata.

Spara temporärt Förhandsgranska Avbryt

Powered by RealQ*

8. Välj Spara och stäng för att skicka meddelande till patienten


Datum:
2018-08-13

Informerat samtycke, 1177:
Ja

"Tillbaka" lämnar förhandsgranskningsläget och återgår till inmatningssidan för att justera/komplettera formulärets variabler.
"Spara & stäng" skrivskyddar formuläret och det går därefter inte att genomföra ytterligare förändringar.
Klicka på **"Avbryt"** för att återgå till sidan **"Studiedata"**.

Powered by RealIQ®

9. När meddelanderutan kommer upp tryck ok.

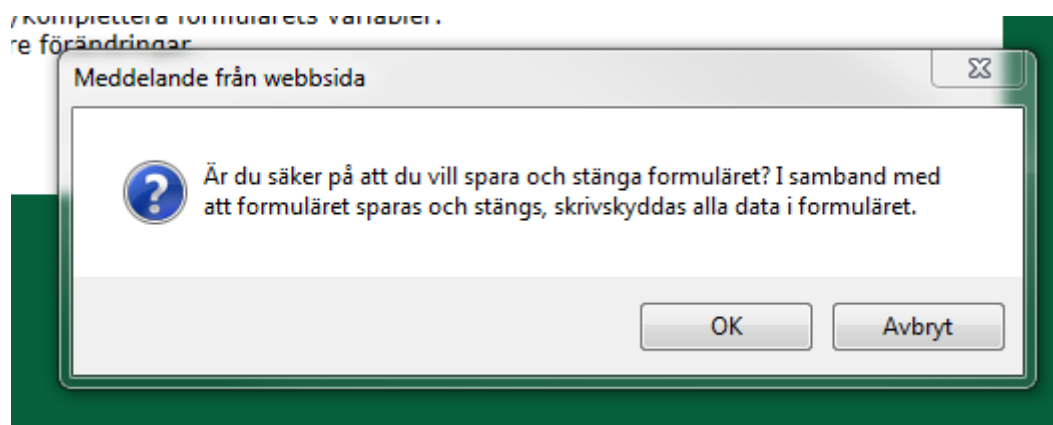

10. På programsidan kan du nu se att en avisering är skickad till patienten. Det kan ta upp till en minut innan statusen blir uppdaterad.

På denna sida har du möjlighet att starta programmen 1177 samt IBD Home för en patient. I listan Program visas de program som patienten är inkluderad i.

I listan Planerade kontakter visas de enkäter som patienten har gjort/skall göra.

Program	Status	Datum för programstart
1177	Aktiverat	2018-08-27

Starta nytt program

Då ett program startas skickas automatiskt en förfrågan till patienten att fylla i Patientformuläret direkt och därefter årligen. Har patienten inte fyllt i formuläret inom 7 dagar skickas en påminnelse. Om extra registreringar önskas använd knappen "Boka extra kontakt".

Boka kontakt

Planerade kontakter - 1177				
Datum	Program	Typ av kontakt	Status	Radera
2018-08-27	1177	1177	Planerad	
2019-08-27	1177	1177	Planerad	
2020-08-27	1177	1177	Planerad	

Efter att ett program är aktiverat så kan det ta upp till en minut innan statusen blir uppdaterad.

1177 Avisering:	1177 Avisering skickad:
Skickad	2018-08-27

Observera att aviseringen endast visar att vårt meddelande gått till patientens inkorg i 1177, aviseringen visar inte om patienten lagt in sms- eller mailuppgifter.

11. När patienten besvarat formuläret hamnar det under patientlistor → Hemmonitorering – osignerade poster

RealQ® IBD - SWIBREG → Inloggad som: Malin Olsson

Sök patient Patientlistor Patientdata Kvalitetssäkring Frågeverktyg Rapporter Administration Mina uppgifter Om SWIBREG

Sök patient

Sök efter en patient i frågan

Sök på fält: Personnummer

Samtliga patienter
10 senaste patienterna
Kontaktinformation
Patientgrupper ▶
Program ▶
Sjukdomsaktivitet ▶
Behandling ▶
Studier ▶
Resultat hemmonitorering IBD Home
Hemmonitorering – Osignerade poster
Anslutna IBD Home
Anslutna 1177

Alternativt ange patientens Id. Välj bland svaren på sökningen i resultat-listan och klicka på patientens Id för att se data kring

PatientId: Sök Ny Patient

Powered by RealQ®

- 12 På denna lista visas alla svar som kommer in via 1177 och IBD-home, för att dessa svar ska komma in på patientens sida i Swibreg så måste de signeras. När rutan signera bockas i så försvinner svaret från denna lista. Vill du förhandsgranska svaret innan det läggs in i registret klicka på förstoringsglaset. Vill du gå in på patientens graf innan du signerar in svaren klicka på patientnummret. Vill du ta bort svaret klicka på radera (Observera att då tas svaret bort helt och kan inte återskapas)
Under frågetecknet hittar du alla teckenförklaringar

Hemmonitorering – osignerade poster



Signera

Signera in svaren i SWIBREG. Detta innebär att svaren försvinner från denna sida och läggs in på patientens sida.

Radera

Den här specifika informationen från patienten raderas och kan inte läsas i SWIBREG.

Signera	Öppna formulär	Patient	Personnummer	Förnamn	Efternamn	Datum (SHS)	Symtom	Funktion	Oro	Välbefinnande	f-Cal Buhlmann	Lösa avföringar	Blod i avföring	Buksmärta	Källa	Radera
<input type="checkbox"/>						2018-08-21						1 (2018-08-21)			1177 (2018-08-21)	
<input type="checkbox"/>						2018-05-16					34 (2018-05-16)				IBD Home (2018-05-16)	

Powered by RealQ[®]

- 13 Under planerade kontakter visas när nästa formulär skickas ut, formulären skickas ut årligen tills programmet stoppas. Observera den aviserade kontakten ligger kvar som planerad tills patienten besvarat formuläret och svaren signerats in i registret, då försvinner den från listan.

På denna sida har du möjlighet att starta programmen 1177 samt IBD Home för en patient. I listan Program visas de program som patienten är inkluderad i.

I listan Planerade kontakter visas de enkäter som patienten har gjort/skall göra.

Program	Status	Datum för programstart
1177	Aktiverat	2018-08-27

Starta nytt program

Då ett program startas skickas automatiskt en förfrågan till patienten att fylla i Patientformuläret direkt och därefter årligen. Har patienten inte fyllt i formuläret inom 7 dagar skickas en påminnelse. Om extra registreringar önskas använd knappen "Boka extra kontakt".

Boka kontakt

Planerade kontakter - 1177				
Datum	Program	Typ av kontakt	Status	Radera
2018-08-27	1177	1177	Planerad	
2019-08-27	1177	1177	Planerad	
2020-08-27	1177	1177	Planerad	

Efter att ett program är aktiverat så kan det ta upp till en minut innan statusen blir uppdaterad.

1177 Avisering:	1177 Avisering skickad:
Skickad	2018-08-27

14. Vill man att patienten ska besvara ett formulär utöver de planerade årliga kontakterna välj önskat datum och klicka på knappen Boka extra kontakt. **Observera att datum måste väljas först**, meddelandet går direkt till patienten det valda datumet.

På denna sida har du möjlighet att starta programmen 1177 samt IBD Home för en patient. I listan Program visas de program som patienten är inkluderad i.

I listan Planerade kontakter visas de enkäter som patienten har gjort/skall göra.

Program	Status	Datum för programstart
1177	Aktiverat	2018-09-03

Starta nytt program

Då ett program startas skickas automatiskt en förfrågan till patienten att fylla i Patientformuläret direkt och därefter årligen. Har patienten inte fyllt i formuläret inom 7 dagar skickas en påminnelse. Om extra registreringar önskas, använd knappen "Boka extra kontakt".

2018-09-03 Boka extra kontakt

Planerade kontakter - 1177				
Datum	Program	Typ av kontakt	Status	Radera
2019-09-03	1177	1177	Planerad	
2020-09-03	1177	1177	Planerad	

Efter att ett program är aktiverat kan det ta upp till en minut innan statusen blir uppdaterad.

1177 Avisering:	1177 Avisering skickad:
Skickad	2018-09-03

15. För att kunna se vilka patienter som är anslutna till 1177, gå in under patientlistor och välj Anslutna 1177, där visas en lista på de patienter som ni anslutit till 1177.

RealQ® IBD - SWIBREG → Inloggad som: Malin Olsson

Sök patient Patientlistor Patientdata Kvalitetssäkring Frågeverktyg Rapporter Administration Mina uppgifter Om SWIBREG

Sök patient

Sök efter en patient i frågan

Sök på fält: Personnummer

Alternativt ange patientens Id. Välj bland svaren på sökningen i resultat-listan och klicka på patientens Id för att se data kring

PatientId:

- Samtliga patienter
- 10 senaste patienterna
- Kontaktinformation
- Patientgrupper ▶
- Program ▶
- Sjukdomsaktivitet ▶
- Behandling ▶
- Studier ▶
- Resultat hemmonitorering IBD Home
- Hemmonitorering – Osignerade poster
- Anslutna IBD Home
- Anslutna 1177**

Powered by RealQ®